

LaboDoser-10

Brugsvejledning

Oversættelse af den originale vejledning



Dok. nr.: 16377026-02_C-da
Udgivelsesdato: 2025.04.04

Ophavsret

Indholdet af denne brugervejledning er Struers ApS' ejendom. Kopiering af brugervejledningens tekst og/eller tegninger/fotografier må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Struers ApS.

Alle rettigheder forbeholdes. © Struers ApS.

Indholdsfortegnelse

1	Om denne vejledning	4
2	Kom godt i gang	4
2.1	Beskrivelse af enheden	4
2.2	Kontrollér paklisten	5
2.3	Pak maskinen ud	5
3	Installation	6
4	Betjening af LaboDoser-10	7
5	Skift diamantsuspension/lubrikant	8
6	Vedligeholdelse	8
7	Fabrikant	8

1 Om denne vejledning



FORSIGTIG

Struers udstyr må kun bruges i forbindelse med og som beskrevet i den medfølgende brugsvejledning.



Bemærk

Læs brugsvejledningen grundigt inden brug.




Bemærk

Se onlineversionen af denne brugsvejledning, hvis du ønsker at se specifikke detaljerede oplysninger.

2 Kom godt i gang


2.1 Beskrivelse af enheden

LaboDoser-10 monteret på LaboPol

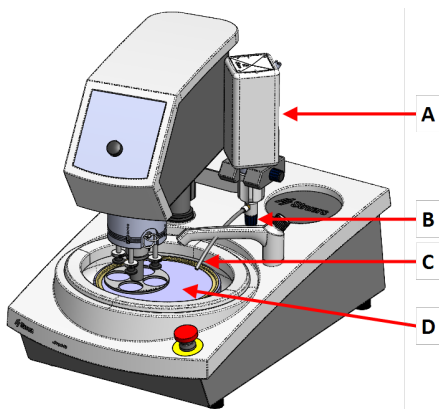

- A LaboDoser-10 flaske med diamantsuspension/-lubrikant
- B Justerbar ventil
- C Doseringsdyse
- D Præparationsskive

LaboDoser-10 monteret på et LaboDoser-10 bordstativ

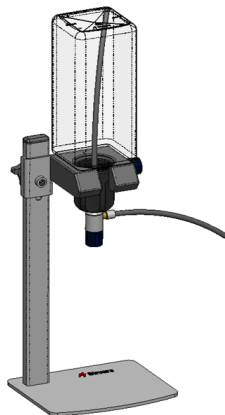

2.2 Kontrollér paklisten

Emballagen indeholder følgende genstande:

Stk.	Beskrivelse
1	LaboDoser-10 enhed med 1,0 liters flaske
1	Sugeslange til 0,5 liters flaske
1	Værktøj til afmontering af Easy connector-tilslutning
1	Unbrakonøgle 3 mm
1	Beslag til doseringsarm
2	Unbrakoskruer
1	Brugsvejledningssæt

2.3 Pak maskinen ud



Bemærk

Vi anbefaler, at man gemmer al original emballage og fittings til fremtidig brug.

1. Skær i tapen på emballagens overside.
2. Fjern de løse dele.
3. Tag enheden ud af emballagen.

3 Installation




Tip

Hvis der ikke skal bruges diamantsuspension/lubrikant i længere tid, skal flasken tages ud af flaskeholderen og opbevare den oprejst.

LaboDoser-10 kan monteres på søjlen på følgende enheder:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Procedure

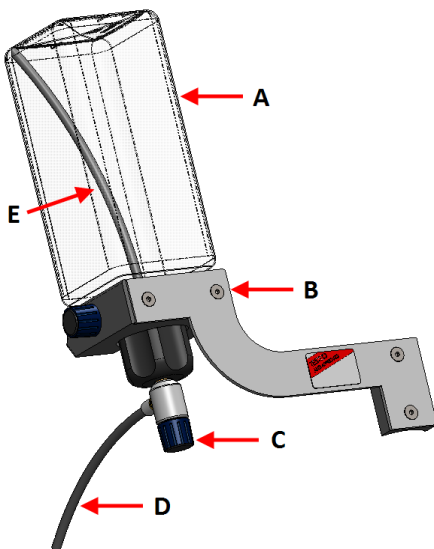

A Diamantsuspension/lubrikantflaske


B Doseringsarm

C Justerbar ventil

D Doseringsdyse

E Sugelange

1. Brug beslaget og de to skruer til at montere doseringsarmen på maskinens søjle.
2. Hvis der bruges en ny flaske med diamantsuspension/lubrikant, fjernes låget, og værktøjet bruges til at fjerne Easy connector-tilslutningen på flasken.

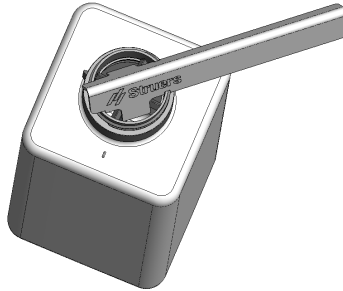

3. LaboDoser-10 hættten er monteret med en sugeslange (A) til en 1,0 liters flaske.
Hvis der bruges en 0,5 liters flaske, skal der skiftes til korte slange (B).

**Bemærk**

Sørg for at montere slangen med den vinklede ende nedad.

4. Fastgør flaskehætten med en justerbar ventil på en Struers diamantsuspension/lubrikantflaske.
5. Isæt flasken i doseringsarmen.

4 Betjening af LaboDoser-10

Operatøren justerer en ventil for at afgive den nødvendige mængde diamantsuspension/lubrikant på præparationsskiven.

1. Anbring doseringsdysen i korrekt position over præparationsskiven.
2. Åbn ventilen, og juster doseringsniveauet for diamantsuspension/lubrikant.

3. Efter at præparationstrinnet er helt fuldført, skal ventilen lukkes for at stoppe dosering.

5 Skift diamantsuspension/lubrikant

Struers anbefaler at bruge en særskilt flaskehætte for hvert forbrugsmateriale. Sådan bruges flaskehætten med et andet forbrugsmateriale:

1. Fjern flasken.
2. Hold godt fast i flasken, og fjern flaskehætten.
3. Tøm flasken, og fyld den med en mild sæbeopløsning.
4. Åbn ventilen, og rengør doseringsdysen.
5. Udskift sæbevandet med rent vand, og gentag ovenstående procedure.
6. Sæt flaskehætten på en Struers flaske med diamantsuspension/lubrikant.

6 Vedligeholdelse

Hvis LaboDoser-10 ikke har været brugt i længere tid, anbefaler vi at rengøre den før brug og fjerne eventuelt indtørret diamantsuspension/lubrikant.

7 Fabrikant

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danmark
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Fabrikantens ansvar

Følgende restriktioner skal overholdes, da en overtrædelse af restriktionerne kan betyde, at Struers' juridiske forpligtelser bortfalder.

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for fejl i tekst og/eller illustrationer i denne brugsvejledning. Struers forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. I brugsvejledningen kan være omtalt tilbehør eller dele, som ikke følger med den leverede udgave af udstyret.

Fabrikanten vil kun være ansvarlig for indvirkning på udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis udstyret anvendes, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med brugsvejledningen.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library