

MD-Disc

Para el uso con Xmatic y Xmatic Compact

Guía del usuario

Traducción de las instrucciones originales



N.º de doc.: 16897026-01_D-es
Fecha de publicación: 2026.05.01

Índice


1	Descripción	2
2	Vista general	3
3	Medidas de seguridad	3
4	Instalación	4
5	Mantenimiento y servicio	4

1 Descripción

El MD-Disc consiste en una superficie magnética sobre una base metálica, y está concebido para su utilización en equipos de esmerilado/pulido Struers para posibilitar el uso de superficies MD.

Tipos			
250 mm (10") de diámetro	Altura	42 mm (1,7")	
	Peso	3,842 kg (9 lb)	
300 mm (12") de diámetro	Peso	6,153 kg (13 lb)	
	Altura	42 mm (1,7")	

2 Vista general

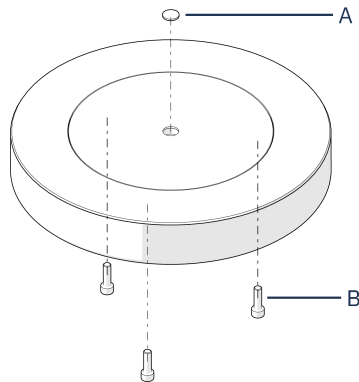

A Tapa protectora

B Tornillos de transporte (M6
20 mm)



Nota

Los tornillos están montados en la parte posterior del MD-Disc.

3 Medidas de seguridad



Leer detenidamente antes de usar la máquina


1. El dispositivo debe instalarse con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad local. Todas las funciones de la máquina y de los equipos conectados deben poder usarse y funcionar sin problemas.
2. Este dispositivo debe montarse de forma segura en la máquina.
3. Utilice calzado de seguridad al manipular piezas de máquina pesadas.

4 Instalación




Nota

Recomendamos que el MD-Disc sea instalado por un técnico cualificado.

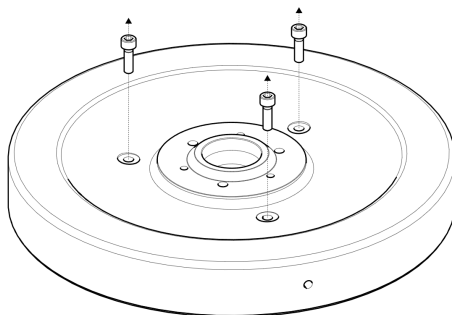

1. Retire los tornillos de transporte (M6 20 mm).

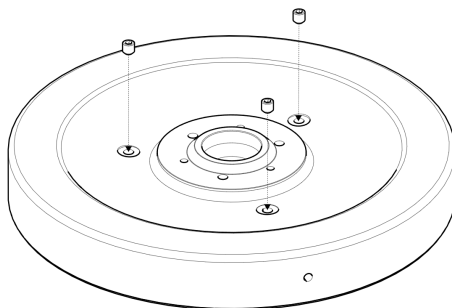

2. Monte los tornillos prisioneros para tapar los agujeros.

5 Mantenimiento y servicio

Para más información sobre el mantenimiento del dispositivo, consulte el manual de instrucciones de la máquina en la que está montado.

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dinamarca
Teléfono: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Derechos de autor

El contenido de este manual es propiedad de Struers ApS. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual sin el permiso por escrito de Struers ApS.

Todos los derechos reservados. © Struers ApS.