

Actualizare v10.00_2021



Pachet de imagistică pentru microscopapele PSM 5/10

Instalarea componentelor hardware

CUPRINS

Utilizarea acestui manual.....	3
1 Conținutul cutiei	4
2 Instrucțiuni de asamblare	5

Utilizarea acestui manual

Acest manual este o anexă la manualul de utilizare PERFECT IMAGE V10. Documentul vă va ghida prin instalarea **pachetului de imagistică pentru microscopale PSM 5/10**.

Pentru îndrumări privind utilizarea software-ului Perfect Image, vă rugăm să consultați instrucțiunile furnizate pe unitatea flash USB de instalare sau accesibile prin intermediul semnului de întrebare din meniul software.

- Vă rugăm să nu ezitați să ne trimiteți comentariile dvs. sau să evidențiați orice puncte pe care le considerați lipsă sau insuficient documentate în acest manual.
- Contactați-ne utilizând <https://www.claravision.com/>

1 Conținutul cutiei



Cutie din aluminiu, cu căptușeală de protecție din spumă

Pad tactil de 10 inchi. Capacitate de 64 Gb cu software-ul Perfect Image Lite

Capac de protecție touchpad

Cutie are două niveluri. Tableta, completată cu software-ul Perfect Image preinstalat, este protejată de un separator detașabil, în timp ce partea inferioară a cutiei găzduiește camera și toate accesoriile pentru capturarea imaginilor.




1. Cameră de 3 MP USB3
2. Cablu USB3/USB C de 1,8 m
3. Adaptor de cameră 0,5X
4. Cablu de alimentare touchpad
5. Unitate flash USB de 30 Gb pentru exporturi de imagini (USB C/USB A)
6. Cheie de instalare (software, drivere, licență, manual)
7. Curea de susținere



2 Instrucțiuni de asamblare

Așezați microscopul pe o suprafață stabilă pentru a garanta funcționarea în siguranță.

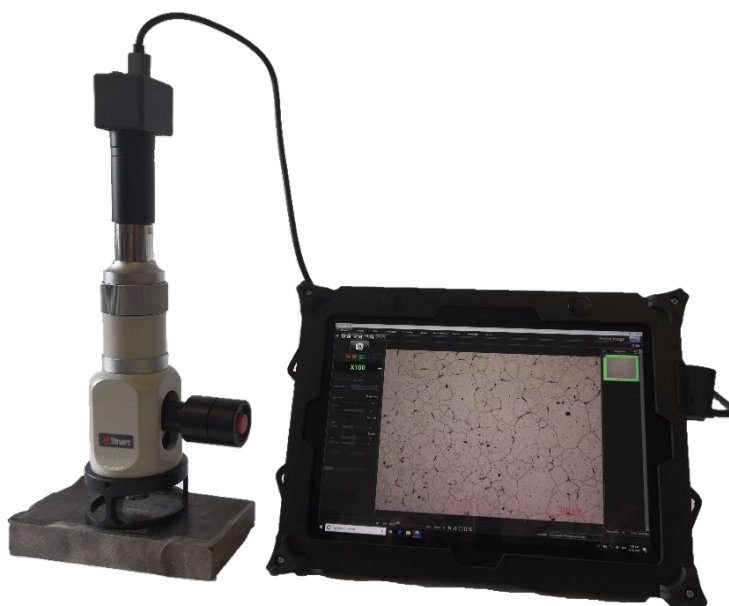

- Atașați o lentilă la microscop



- Folosiți „trepiedul” sau masa X/Y ca suport pe care să așezați microscopul.

- Verificați dacă sursa de lumină este echipată cu o baterie (comutator roșu)

- Trageți ușor și răsușiți pentru a scoate ocularul microscopului



și depozitați-l direct în cutie.

- Luați adaptorul (pagina 4, articolul « 3 »)
- Glisați adaptorul în poziție, înlocuind ocularul pe care tocmai l-ați îndepărtat.
 - Un șurub mic de reglare poate fi folosit pentru a asigura strângerea corectă (cheie hexagonală mică)



- Înșurubați camera pe montura C (filet fin)
- Conectați un capăt al cablului USB la cameră și celălalt la touchpad.
- Porniți tableta
- Porniți lumina microscopului
- Lansați Perfect Image; pe ecran va apărea o imagine
- Focalizarea este reglată pe microscop prin rotirea piuliței gri

