

Uppdatering v10.00\_2021



# Avbildningspaket för PSM 5/10 mikroskop

Installation av maskinvara

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Använda denna instruktionsbok .....</b> | <b>3</b> |
| <b>1 Väskansinnehåll .....</b>             | <b>4</b> |
| <b>2 Monteringsinstruktioner .....</b>     | <b>5</b> |

## Använda denna instruktionsbok

Denna instruktionsbok är en bilaga till användarmanualen för PERFECT IMAGE V10. Dokumentet tar dig genom installationen av **avbildningspaketet för PSM 5/10 mikroskop**.

**För vägledning om hur du använder Perfect Image-mjukvaran kan du se instruktionerna som finns i USB-installationsminnet. Du kan också komma åt instruktionerna via frågetecknet i mjukvarumenyn.**

- Skicka gärna dina kommentarer till oss eller markera punkter som du anser saknas eller är otillräckligt dokumenterade i denna manual.
- Kontakta oss via <https://www.claravision.com/>

## 1 Väskans innehåll



Aluminiumväska med skyddande skumfoder

10 tums pekplatta. 64 Gb kapacitet med Perfect Image Litemjukvara

Skyddshölje för pekplatta

Väskan har två avdelningar. Surfplattan, komplett med förinstallerade Perfect Image-mjukvara, skyddas av en borttagbar avdelare, medan botten av väskan rymmer kameran och alla bildupptagnings tillbehör.




1. 3MP USB3-kamera
2. USB3/USB C 1,8 m kabel
3. 0,5X kameraadapter
4. Pekplattans strömkabel
5. 30 Gb USB-minne för bildexport (USB C/USB A)
6. Installationsminne (mjukvara, drivrutiner, licens, manual)
7. Stöd rem



## 2 Monteringsinstruktioner

Placera mikroskopet på en stabil yta för att säkerställa säker drift.

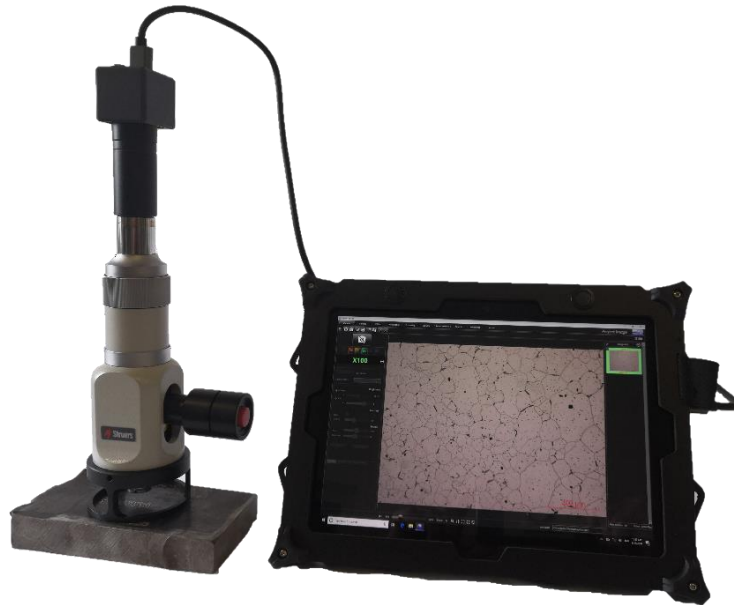

- Fäst en lins på ditt mikroskop



- Använd « stativet » eller ditt X-/Y-bord för att ställa mikroskopet på.

- Kontrollera att det finns ett batteri i lampan (röd brytare)

- Dra och vrid försiktigt för att ta bort mikroskopokularet och



sätt det direkt i väskan för förvaring.

- Ta adaptern (sidan 4 objekt « 3 »)

- Skjut adaptern på plats. Den ersätter okularet du precis tog bort.

- Du kan använda en liten inställningsskruv för att säkerställa att justeringen är tillräckligt hårt åtdragen (liten insexnyckel)



*Perfect Image V10-2020*

*Avbildningspaket för PSM 5/10 mikroskop*

- Skruva fast kameran på C-fästet (fingänga)
- Anslut den ena änden av USB-kabeln till kameran och den andra till pekplattan.
- Slå på surfplattan
- Tänd mikroskopets lampa
- Starta Perfect Image och en bild kommer att visas på skärmen
- Justera mikroskopets fokus genom att vrida på den grå muttern

