

MD-Disc

Pour une utilisation avec Xmatic et XmaticCompact

Guide de l'utilisateur

Traduction des instructions originales

N° de document : 16897026-01_D-fr

Date de publication : 2026.05.01

Table des matières


1	Description	2
2	Aperçu	3
3	Mesures de sécurité	3
4	Installation	4
5	Maintenance et service	4

1 Description

Le MD-Disc est constitué d’une surface magnétique posée sur une base métallique et est destiné à être utilisé sur des équipements de prépolissage/polissage Struers pour permettre l’utilisation de surfaces MD.

Types			
250 mm (10") de diamètre	Hauteur	42 mm (1,7")	
	Poids	3,842 kg (9 lb)	
300 mm (12") de diamètre	Poids	6,153 kg (13 lb)	
	Hauteur	42 mm (1,7")	

2 Aperçu

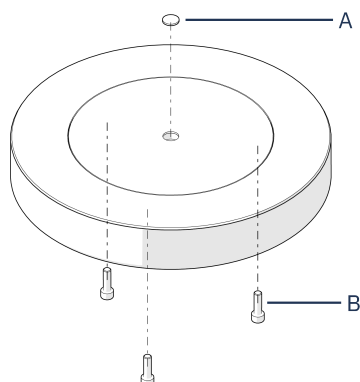

A Couvercle de protection

B Vis de transport (M6 20 mm)



Remarque

Les vis sont montées à l'arrière du MD-Disc.

3 Mesures de sécurité



À lire attentivement avant utilisation


1. L'installation du dispositif doit être conforme aux règles de sécurité locales. Toutes les fonctions de la machine et tout équipement connecté doivent être parfaitement opérationnels.
2. Ce dispositif doit être fixé solidement sur la machine.
3. Portez des chaussures de sécurité lors de la manipulation des pièces de machine lourdes.

4 Installation




Remarque

Nous recommandons que le MD-Disc soit installé par un technicien qualifié.

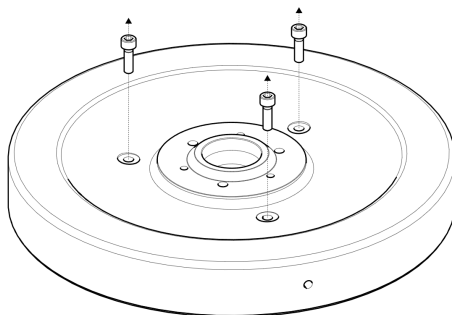

1. Retirez les vis de transport (M6 20 mm).

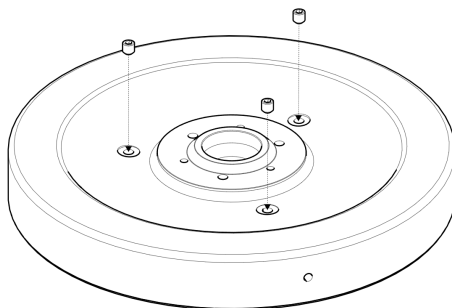

2. Fixez les vis de fixation pour couvrir les trous.

5 Maintenance et service

Pour plus d'informations sur l'entretien du dispositif, consultez le mode d'emploi de la machine sur laquelle il est monté.

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemark
Téléphone : +45 44 600 800
Fax : +45 44 600 801
www.struers.com

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.

Tous droits réservés. © Struers ApS.